

neptune<sup>TM</sup>  
toilet lift

mountway  
solo<sup>TM</sup>  
toilet lift

GB	Operating instructions	pg 2
US	Operating instructions	pg 19
F	Consignes d'utilisation	p 35
D	Betriebsanleitung	S 51
E	Instrucciones de uso	pag 67
I	Istruzioni operative	pag 83
NL	Bedieningsinstructies	pag 99

# Betriebsanleitung

**Stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Sie selbst als auch Ihre Helfer diese Anleitung lesen, bevor Sie den Toilettenlift benutzen. Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung für eine künftige Bezugnahme auf.**

Dieser Toilettenlift wurde konzipiert und hergestellt, um Personen beim Toilettengang zu helfen. Der Lift sollte für keine anderen Zwecke eingesetzt werden. Verwenden Sie den Lift nicht zusammen mit anderen Hebe- oder Bewegungsgeräten.

Der Toilettenlift ermöglicht Patienten mit eingeschränkter Beweglichkeit die Toilette selbstständig zu benutzen. Er ist ideal für Personen mit erheblichen Problemen beim Hinsetzen und Aufstehen durch Muskel- oder Gelenkschwäche in den unteren und oberen Extremitäten, die den Gebrauch von herkömmlichen manuellen Aufstehhilfen unmöglich machen.

Mögliche Indikationen sind unter anderem Arthritis, Multiple Sklerose und motoneurale Erkrankungen.

## Inhaltsverzeichnis

### Auspacken des Toilettenliftes

1. Auspacken des Toilettenliftes. ....	52
--	----

### Einbau des Toilettenliftes

2. Aufladen des Batteriepacks .....	52
3. Montage der Armlehnen (sofern zutreffend) .....	53
4. Montage der Fußsteller und rutschfesten Polster .....	54
5. Montage über der Toilette .....	55
6. Dauerhafte Befestigung der Fußsteller am Boden (sofern zutreffend) .....	56

### Verwendung des Toilettenliftes

7. Verwendung des Toilettenliftes. ....	57
---	----

### Gewährleistung, Wartung und Reparatur

8. Reinigung .....	58
9. Wartung und Reparatur .....	58
10. Gewährleistung .....	58

### Symbole

11. Symbole. ....	59
-------------------	----

### Patientenwechsel

12. Patientenwechsel .....	60
----------------------------	----

### Technische Daten

13. Technische Daten .....	60
14. Abmessungen .....	62

### Fehlersuche

15. Fehlersuche .....	63
-----------------------	----

### Teileliste

16. Zubehör .....	65
17. Teileliste .....	66

# Diagramme für Betrieb und Benutzungserläuterung finden Sie auf dem beiliegenden Diagrammblatt

## 1. Auspacken des Toilettenliftes

Packen Sie Ihren Toilettenlift (**siehe Abb. 1**) in einem weiträumigen Bereich aus, um die Handhabung zu vereinfachen. Öffnen Sie die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass der Toilettenlift nicht beschädigt ist und alle Bauteile vorhanden sind. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Bauteile fehlen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Lieferanten.

Im Karton werden Sie Folgendes finden:

- Einen Toilettenlift komplett mit Sitz
- 2 Batteriepacks
- Ein Batterieladegerät
- 4 Fußsteller und 4 haftende rutschfeste Polster
- Handsteuerung (bei Modellen ohne Armlehnen oder ohne Betriebsschalter an der Armlehne)

Optional:

- Rechte/linke Armlehne
- Armlehne mit Betriebsschalter
- Inbusschlüssel zur Befestigung der Armlehne(n)

### HINWEIS:

Wenn in dieser Betriebsanleitung von LINKS oder RECHTS gesprochen wird, geschieht dies immer aus Sicht des auf dem Toilettenlift sitzenden Nutzers. Wenn Benutzer oder Wartungspersonal den Toilettenlift bedienen und dabei mit dem Gesicht zum Produkt stehen, sollte hier die umgekehrte Perspektive angewendet werden.

## 2. Aufladen des Batteriepacks

**Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung Ihres Toilettenliftes oder nach langen Standzeiten (in der Regel 7-10 Tage) wie folgt vollständig auf. Eine leere Batterie benötigt ungefähr 5 Stunden zum Aufladen.**

- i) Verbinden Sie den Bananenstecker am Kabel des Ladegerätes mit der Dose für den Bananenstecker unter dem Batteriepack (**siehe Abb. 2**).
- ii) Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose außerhalb des Badezimmers.
- iii) Die Anzeigenleuchte des Ladegeräts blinkt zunächst kurz rot-grün-rot-grün, bevor der Ladevorgang über ein rotes Dauerlicht angezeigt wird (**siehe Abb. 2**).

- iv) Wenn die Batterie vollständig geladen ist, wechselt das rote Licht am Ladegerät auf ein grünes Dauerlicht, das anzeigt, dass die Batterie einsatzbereit ist und weiter im Ladegerät verbleiben kann, bis Sie den Toilettenlift verwenden.
- v) Wenn Sie Ihr vollständig aufgeladenes Batteriepack benutzen wollen, trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose. Achten Sie anschließend darauf, das Batteriepack von der Halterung des Ladegerätes zu trennen. (Dadurch wird ein Entladen des Batteriepacks verhindert und das Ladegerät für das Aufladen des anderen Batteriepacks zurückgesetzt).
- vi) Wiederholen Sie die Schritte **i)** bis **v)**, um das andere Batteriepack vollständig aufzuladen. Wir empfehlen, das Batteriepack, das nicht verwendet wird, während der Verwendung des anderen Batteriepacks zu laden und diese regelmäßig auszutauschen. Die Batteriepacks können nicht überladen werden.

#### HINWEIS:

- Das rote Licht am Batteriepack (**siehe Abb. 3**) leuchtet NIE, wenn das Batteriepack an das Ladegerät angeschlossen ist.
- Decken Sie weder Batteriepack noch Ladegerät während des Ladevorgangs ab.
- Führen Sie den Ladevorgang stets auf einer harten Oberfläche durch.
- Während der Aufladung kann die Temperatur des Ladegeräts über 40°C steigen, wird sich dann aber allmählich senken, sobald die grüne Lampe auf dem Kasten dauernd leuchtet. Benutzer mit empfindlicher oder beschädigter Haut sollten vorsichtig sein und für circa 6 Stunden ab Beginn der Aufladung warten, bevor sie den Kasten handhaben.
- Laden Sie die Batterie nie im Badezimmer oder einem anderen feuchten Bereich auf. Laden Sie die Batterie stets in einer trockenen Umgebung und vergewissern Sie sich vorher, dass Ihre Hände trocken sind.
- Verwenden Sie zum Wiederaufladen der Batteriepacks ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät von Mountway, und verwenden Sie es zu keinem anderen Zweck.

### 3. Montage der Armlehnen (sofern zutreffend)

Zur Montage der Armlehnen am Toilettenlift empfehlen wir, den Sitz des Toilettenliftes zuerst vollständig anzuheben, da Sie dadurch einen besseren Zugang zu den Befestigungen unter dem Sitz erhalten. Befolgen Sie zum Anheben des Sitzes bitte die unten stehenden Schritte **i)** und **ii)**:

- i) Stecken Sie das Kabel an der Armlehne mit Betriebsschalter in die Dose, die sich unten links am Toilettenlift befindet (**siehe Abb. 4**). Wenn Sie keine Armlehne mit Betriebsschalter haben, verbinden Sie das Kabel der Handsteuerung mit der Dose.
- ii) Legen Sie ein vollständig aufgeladenes Batteriepack in das linke Batteriefach an der Vorderseite des Toilettenliftes ein (**siehe Abb. 5**) und bewegen Sie anschließend den Kippschalter auf der Armlehne nach LINKS (**siehe Abb. 6**) (oder betätigen Sie die Taste AUF auf der Handsteuerung, sofern vorhanden (**siehe Abb. 14**), bis der Sitz vollständig aufgeklappt ist.
- iii) Entnehmen Sie das Batteriepack.

- iv) Schieben Sie die Gummidichtungen auf den Lifterstreben nach unten und verwenden Sie dann den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Schrauben und die Armlehnenklemmen zu entfernen, die beidseitig unter dem Sitz befestigt sind (**siehe Abb. 7**).
- v) Drücken Sie die Armlehnenstange in das Loch an der Seite des Toilettenliftsitzes (**siehe Abb. 8**). Dazu kann ein wenig Druck erforderlich sein.
- vi) Richten Sie die Armlehnenstange mit der Unterseite des Sitzes aus (**siehe Abb. 9**) und lassen Sie die Armlehnenklemme darüber einrasten. Jetzt sollte die Armlehnenklemme mit dem Sitz fluchten. Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Klemme und die Schrauben wieder zu befestigen und die Armlehne zu sichern (**siehe Abb. 10**). Schieben Sie die Gummidichtung wieder in die Ausgangsposition an der Lifterstrebe. Wenn eine weitere Armlehne mitgeliefert wird, wiederholen Sie die Schritte **v**) bis **vi**), während sich der Sitz in seiner höchsten Position befindet.
- vii) Legen Sie das Batteriepack wieder in das Batteriefach ein (**siehe Abb. 5**).
- viii) Bewegen Sie den Kippschalter auf der Armlehne nach RECHTS (**siehe Abb. 6**) (oder betätigen Sie die Taste AB an der Handsteuerung, sofern vorhanden), bis der Sitz wieder vollständig abgesenkt ist.
- ix) Entnehmen Sie das Batteriepack.

#### HINWEIS:

- Standardmäßig befindet sich der Betriebsschalter auf der linken Armlehne. Die rechte Armlehne mit Betriebsschalter wird nach **gesonderter Bestellung** geliefert.
- Die Armlehnen sind als Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen konzipiert und **NICHT** als Hebemechanismen. **Auf die Armlehnen sollten keine übermäßigen Kräfte wirken.** Bewegen Sie den Toilettenlift **NICHT** an den Armlehnen.

## 4. Montage der Fußteller und rutschfesten Polster

Ihr Toilettenlift wird mit 4 Fußtellern und 4 haftenden rutschfesten Polstern geliefert. Wenn die rutschfesten Polster angebracht sind, bieten diese zusätzliche Stabilität, insbesondere auf glatten Fußböden, z. B. gefliest oder beschichtet.

- i) Entfernen Sie das Papier von den Polstern und befestigen Sie diese mittig an der flachen Unterseite von jedem Fußteller.
- ii) Richten Sie jeden Fußteller unter den Füßen des Toilettenliftes aus und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn (**siehe Abb. 11**), um die Fußteller in die Füße einzurasten. **Dies sollte erfolgen, bevor Sie den Toilettenlift über der Schüssel anordnen.**

**HINWEIS:**

- Wenn die Fußteller zur Befestigung des Toilettenliftes dauerhaft am Boden befestigt werden sollen (siehe Abschnitt 6, "Dauerhafte Befestigung der Fußteller am Boden"), empfehlen wir die **vorherige** Verwendung von rutschfesten Polstern, um ein Verdrehen zu vermeiden. Diese Polster sollten jedoch **NICHT** verwendet werden, wenn Sie zur dauerhaften Befestigung der Fußteller am Boden einen Klebstoff einsetzen.
- Befestigen Sie die Fußteller **ERST** dauerhaft am Boden, wenn Sie die korrekte Anordnung des Toilettenliftes über der Toilette herausgefunden haben (siehe Abschnitt 5 unten, "Montage über der Toilette").

## 5. Montage über der Toilette

Stellen Sie sicher, dass das Batteriepack während der Montage nicht mit dem Toilettenlift verbunden ist.

- Entfernen Sie den vorhandenen Toilettensitz und stellen Sie sicher, dass alle Bodenbereiche sauber und trocken sind, um die Rutschgefahr zu beseitigen. Stellen Sie eine sichere und feste Bodenfläche sicher, d.h. keine gebrochenen Platten oder Fliesen.

**HINWEIS:**

Stellen Sie sicher, dass die Handsteuerung nicht auf dem Boden entlang gezogen wird, bevor Sie den Toilettenlift bewegen, da diese zu einer Stolpergefahr oder versehentlich beschädigt werden kann.

- Positionieren Sie den Toilettenlift mittig über der Schüssel und stellen Sie dabei sicher, dass sich die Sitzeinfassung (**siehe Abb. 12**) innerhalb der Schüssel befindet. Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass die hintere Querstange (**siehe Abb. 12**) das Porzellan der Toilette nicht berührt und dass alle vier Füße Bodenkontakt haben. Wenn die Toilette auf dem Porzellan hin und her rutscht, haben die Füße keinen vollständigen Bodenkontakt und/oder gibt es nicht genug Spielraum zwischen der Toilette und der hinteren Querstange. Es sollte darüber hinaus ein Mindestspiel von 25 mm zwischen der Schüssel und der Unterseite des Toilettenliftsitzes bestehen. Wenn Sie den Toilettenlift in der Höhe anpassen müssen, damit dieser nicht auf dem Porzellan aufliegt, drehen Sie die Füße gegen den Uhrzeigersinn, um den Lift anzuheben, und im Uhrzeigersinn, um den Lift abzusenken. Wenn sich die Füße schwer drehen lassen, haben Sie die maximale Höheneinstellung erreicht. Wenn Sie die Füße weiter drehen, kann dies zu einer Trennung der Füße vom Toilettenlift führen. Wenn Sie mehr Höhe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, um Informationen zur Eignung von optionalen Verlängerungsfüßen zu erhalten (siehe Abschnitt 15, "Zubehör").
- Legen Sie eines der vollständig geladenen Batteriepacks in das linke Batteriefach an der Vorderseite des Toilettenliftes (**siehe Abb. 5**). Betätigen Sie die Bedienelemente auf der Handsteuerung (oder Armlehne), um zu prüfen, dass keine Armaturen (z. B. Waschbecken, Bidet) den Hebe- und Absenkvorgang des Toilettenliftes behindern.

**HINWEIS:**

Der Toilettenlift ist ein leistungsstarkes Hebegerät und es ist wichtig, dass sich **KEINE** Hindernisse während des Hebe- und Absenkvorgangs verfangen. Wenn sich die Armlehnen oder der Sitz verfangen, stoppen Sie **SOFORT** den Betrieb und senken sie den Sitz ab bzw. heben Sie diesen an, so dass dieser sich wieder lösen kann. Entfernen Sie entweder eine oder beide Armlehnen oder entfernen Sie das externe Hindernis, z. B. Toilettenrollenhalter oder Stange.

iv) Entnehmen Sie das Batteriepack aus dem Toilettenlift.

**HINWEIS:**

- Es ist ratsam, dass Sie oder Ihr Pfleger den Toilettenlift regelmäßig auf korrekte Ausrichtung über der Toilettenschüssel prüfen, um Quetschgefahren zu vermeiden.
- Prüfen Sie das Produkt darüber hinaus regelmäßig auf offensichtliche Beschädigungen.

## 6. Dauerhafte Befestigung der Fußteller am Boden (sofern vorhanden)

Für ein Höchstmaß an Sicherheit, insbesondere wenn der Toilettenlift mit Armlehnen ausgestattet ist, ist es ratsam, die Fußteller durch Schrauben oder einen Klebstoff auf Silikonbasis dauerhaft am Boden zu befestigen.

**Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass der Bereich um die Toilette frei von im Boden verlegten Rohren und Heiz- und Elektrokabeln ist.**

- i) Sobald die Fußteller befestigt (siehe Abschnitt 4, "Montage der Fußteller und rutschfesten Polster") und der Toilettenlift korrekt über der Toilette positioniert sind (siehe Abschnitt 5, "Montage über der Toilette"), markieren Sie den Umriss eines jeden Fußtellers mit Hilfe eines abwaschbaren Stiftes.
- ii) Entfernen Sie den Toilettenlift und nehmen Sie die Fußteller ab.
- iii) Positionieren Sie die Fußteller wieder auf den Markierungen und achten Sie dabei auf eine korrekte Ausrichtung.
- iv) Befestigen Sie die Fußteller entweder über Schrauben oder Silikon am Boden (verwenden Sie dazu das mittige Loch im Fußteller).
- v) Positionieren Sie den Toilettenlift wieder über der Schüssel und achten Sie darauf, dass sich die Füße in den am Boden befestigten Fußtellern befinden, Drehen Sie die Füße gegen den Uhrzeigersinn, um diese in den Tellern einrasten zu lassen (**siehe Abb. 13**).

## 7. Verwendung des Toilettenliftes

- i) Legen Sie das vollständig geladene Batteriepack in das linke Batteriefach an der Vorderseite des Toilettenliftes (**siehe Abb. 5**).
- ii) Wenn die erste Taste auf der Handsteuerung (**siehe Abb. 14**) oder der Armlehenschalter (ggf.) erstmals betätigt wird (**siehe Abb. 6**), wird ein Batterietest gestartet. Nach Abschluss des Testes leuchtet die entsprechende Leuchte wie folgt auf der **Handsteuerung (oder Armlehne mit Betriebsschalter)**:
  - Bei **GRÜNEM** Licht – Sie können den Toilettenlift weiterhin nutzen, vorausgesetzt, dass das Batteriepack innerhalb der letzten 7-10 Tage geladen wurde.
  - Bei **BLINKENDEM GRÜNEM** Licht – Sie können den Toilettenlift weiterhin nutzen, vorausgesetzt, dass das Batteriepack innerhalb der letzten 7-10 Tage geladen wurde. Laden Sie das Batteriepack **UNMITTELBAR** im Anschluss (siehe Abschnitt 2, "Aufladen des Batteriepacks").
  - Bei **ROTEM** Licht **am Batteriepack (NICHT Handsteuerung oder Armlehne)** – Verwenden Sie den Toilettenlift **NICHT**. Laden Sie das Batteriepack **UNMITTELBAR** auf (siehe Abschnitt 2, "Aufladen des Batteriepacks") und schließen Sie das zweite Batteriepack an, sofern dies vollständig aufgeladen ist.
- iii) Um den Toilettenliftsitz auf die erforderliche Höhe zu heben, drücken Sie entweder die Taste AUF auf der Handsteuerung (**siehe Abb. 14**) oder bewegen Sie den Kippschalter auf der Armlehne nach LINKS (**siehe Abb. 6**).
- iv) Setzen Sie sich vorsichtig auf den Sitz.
- v) Um den Sitz auf eine komfortable Höhe abzusenken, drücken Sie die Taste AB auf der Handsteuerung oder bewegen Sie den Kippschalter auf der Armlehne nach RECHTS (sofern zutreffend). Der Toilettenlift kann jederzeit angehalten werden, damit Sie sich auf dem Sitz neu positionieren können. Lassen Sie dazu die Taste oder den Schalter los.
- vi) Betätigen Sie die Taste AUF auf der Handsteuerung oder bewegen Sie den Kippschalter auf der Armlehne nach LINKS, um sich selbst wieder in eine aufrechte Position zu heben.
- vii) **Nach JEDER Verwendung sollte der Sitz des Toilettenliftes in die niedrigste Position abgesenkt werden.**

### HINWEIS:

- Die Batteriepacks sind ausschließlich mit dem Toilettenlift von Mountway zu verwenden und können nicht zum Betrieb irgendeines anderen Produktes eingesetzt werden.
- Wenn die **ROTE** Leuchte **während der Verwendung** am Batteriepack leuchtet, können Sie den Toilettenlift weiter verwenden, müssen diesen jedoch **UNMITTELBAR** im Anschluss aufladen.
- Ein seitlicher Transfer ist möglich, wenn sich der Sitz in der untersten Position befindet. Wenn der Toilettenlift mit Armlehnen ausgestattet ist, heben Sie diese an, um seitlichen Zugang zu erhalten.
- Um jeglichen versehentlichen Schaden an der Handsteuerung zu vermeiden, lassen Sie diese **NICHT** frei herunterhängen.
- Im Notfall können alle Bewegungen durch die Herausnahme des Batteriepacks beendet werden.



## 8. Reinigung

Reinigen Sie den Toilettenlift sooft wie Sie Ihre Toilette reinigen und verwenden Sie dazu einen schonenden, nicht scheuernden Badreiniger\*. Wenn der Toilettenlift von mehreren Personen verwendet wird, sollte dieser nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Reiniger auf Lösemittelbasis, wie zum Beispiel Waschbenzin, sollten NICHT verwendet werden, da hierdurch der Sitz und die Abdeckflächen beschädigt werden.

- i) Wischen Sie den Toilettenlift zur Desinfektion mit einem weichen Tuch mit einer Sterilisierlösung oder einem antibakteriellen Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie diese in derselben Konzentration wie für andere Haushaltoberflächen wie z. B. Waschbecken oder Badewannen.
- ii) Wischen Sie das Produkt mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- iii) Der Toilettenlift ist **NICHT WASSERDICHT** und **DARF NICHT** in einer Waschmaschine gereinigt werden. Reinigen Sie das Produkt ausschließlich von Hand. Reinigen Sie das Produkt **NICHT** in einer Dusche und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein.

\* Reinigungsmittel sind gemäß den Herstellerangaben zu verwenden.

## 9. Wartung und Reparatur

Der Toilettenlift verfügt über **keine** durch den Benutzer zu wartende Bauteile. Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sind durch einen befugten Vertragshändler von Mountway durchzuführen.

Der Toilettenlift ist jährlich durch einen befugten Vertragshändler von Mountway zu prüfen. Dieser überprüft den Lift auf lose Anschlüsse und Anzeichen für mechanische Schäden. Darüber hinaus sollten Sie den Bodenbereich oder Boden überprüfen, um sicherzustellen, dass der Einsatz Ihres Toilettenliftes absolut sicher ist.

## 10. Gewährleistung

Dieses Produkt verfügt über eine Gewährleistung, die im Falle eines Herstellungs- oder Materialdefekts, der innerhalb von 2 Jahren nach dem Datum des Erhalts des Produkts auftritt, die Reparatur für einen entsprechenden Defekt deckt, vorausgesetzt dass:

- i) angemessene Belege geliefert werden (z. B. Rechnung oder Lieferschein), dass das Produkt vor nicht mehr als 2 Monaten vor dem Datum des Anspruchs gekauft wurde, und
- ii) der Defekt keiner Beschädigung durch Unfall (entweder beim Transport oder auf sonstige Weise), erwartungsgemäßer Abnutzung, willentlicher Beschädigung, Missbrauch oder unbefugter Reparatur zugeschrieben werden kann.

Die Batterie verfügt ebenfalls über eine Garantie von 1 Jahr entsprechend den oben genannten Bedingungen.

Die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers werden hierdurch nicht betroffen.

## Einsatzdauer - Toilettenlift




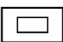




Die Dauerhaftigkeit des Toilettenliftes wurde nach BS EN 10535:2006 (Heber für den Transfer von Körperbehinderten - Anforderungen und Prüfmethode) geprüft. Wenn er gemäß Betriebsanleitung gewartet und benutzt wird, leisten der Toilettenlift und alle Teile (ausschließlich Batterie) 11.000 Hebezyklen bzw. 5 Jahre Einsatz, was immer zuerst eintritt.

## Einsatzdauer – Batterie

Es ist wesentlich, dass die Betriebsanleitungen für den Einsatz und die Aufladung der Batterie eingehalten werden. Die Batterie verfügt über eine Einsatzdauer von 500 Aufladungen bzw. 1 Jahr Einsatz, was immer zuerst eintritt. Wir empfehlen, die Batterie dementsprechend zu erneuern, um die beste Leistung von Ihrem Toilettenlift zu erzielen.

## 11. Symbole

Zur Einhaltung der internationalen Normen für medizinische Geräte erscheinen die folgenden Symbole auf den Etiketten des Toilettenliftes:

Symbol	Erläuterung
	Zur Stromversorgung Ihres Toilettenliftes wird nur Gleichstrom von einer kleinen Batterie eingesetzt. Im Betrieb besteht kein Netzstromanschluss, daher besteht keine Stromschlaggefahr.
	Dieses Symbol erscheint auf der Handsteuerung und bedeutet, dass die Lampe den Batteriestatus darstellt.
	Der Toilettenlift ist ein medizinisches Gerät vom Typ B und erfüllt die internationalen Normen für elektrische Sicherheit.
<b>IP44</b>	Der Toilettenlift ist gegenüber den Auswirkungen von Spritzwasser in Übereinstimmung mit den internationalen Normen abgedichtet.
	Geräte der Klasse II.
	<b>BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER MONTAGE ODER DEM GEBRAUCH.</b>
<b>SN</b>	Seriennummer.
<b>REF</b>	Nummer für Nachbestellungen.
	Maximale Last - Tragfähigkeit (Person).
	Nicht wegwerfen/entsorgen.
	Vorsicht! Heiße Oberfläche.

## 12. Patientenwechsel

Der Toilettenlift ist für den Einsatz für den Wiedereinsatz geeignet. Vor der Benutzung des Toilettenliftes bei einem anderen Patienten ist dieser entsprechend den Anweisungen gründlich zu reinigen, zu desinfizieren und durch einen autorisierten Fachhändler auf mögliche Schädigungen zu untersuchen. Weiterhin ist die Gebrauchsanweisung zu übergeben und es hat eine Einweisung für den sicheren Umgang mit dem Toilettenlift zu erfolgen.

## 13. Technische Daten

Der Toilettenliftsitz ist aus ABS hergestellt. Alle strukturellen Komponenten, d.h. das Chassis und die Lifterstreben, sind aus Polypropylen. Die Seiten- und Batterieabdeckungen und das Handgerät sind aus ABS. Die Füße sind aus Nylon.

Der Toilettenlift gehört zur offiziellen Kategorie der "Geräte mit interner Stromversorgung" und ist nicht zum Gebrauch bei Vorhandensein entflammbarer narkotisierender Mischungen geeignet, die Luft oder Stickoxid enthalten.

Das Gerät wurde überprüft gemäß:

- BS EN 60335-1: 2002
- BS EN 60601-1: 2006
- Die Richtlinie des Europäischen Rates 93/42/EWG bezüglich medizinischer Geräte

Der Toilettenlift erfüllt die Vorgaben der WEEE-Richtlinie.

**ENTSORGUNG:** Die Kunststoffteile, Metallteile und Verpackungsmaterialien sind wieder verwertbar. Die Batterien sind nicht wieder verwertbar und sollten nur durch Rückgabe an den Lieferanten, den Hersteller oder eine befugte Entsorgungsstelle entsorgt werden.

Toilettenlift	
Gesamtbreite ohne Armlehnen	612mm
Breite über Toilette	390mm
Sitzhöhe (unten)	430mm min
	490mm max
Tiefe vorn nach hinten	540mm
Höheneinstellungen	
Höhe über Toilette	370mm – 430mm
Fußeinstellung	60mm
Höhenbereich Fuß	360mm – 420mm
Maximale Belastung - Tragfähigkeit	
	160kg
Betriebszyklus	
	Ein vollständiger Zyklus alle 5 Minuten
Leistungsaufnahme	
	14,4VDC nominell 10A max.
Schutzklasse	
	IP44
Gewicht	
Toilettenlift (einschließlich Batteriepack, aber ohne Armlehnen)	19,04kg
Verpackungskarton (max.)	6,91kg
Bruttogewicht verpackt	33kg

## Betrieb und Aufladung


Batterie ladegerät	
Leistungsaufnahme	100-240VAC 50-60Hz 1,0A
Nennleistung	14,4VDC nominell 1,0A
Batteriepack	
Nennleistung	14,4VDC nominell 3.000mAh
Betriebs- und Aufladungstemperaturen	
Max	40°C
Min	0°C
Farbe	
	Weiß

## Versand und Lagerung


Temperaturen	
Max	50°C
Min	-10°C
Feuchtigkeit	
Max	90% RH
Min	10% RH
Druck	
Max	125kPa
Min	73kPa

Dieses Produkt ist für den Transport in unter Druck stehenden Flugzeugladeräumen geeignet.

## 14. Abmessungen (in Millimetern)

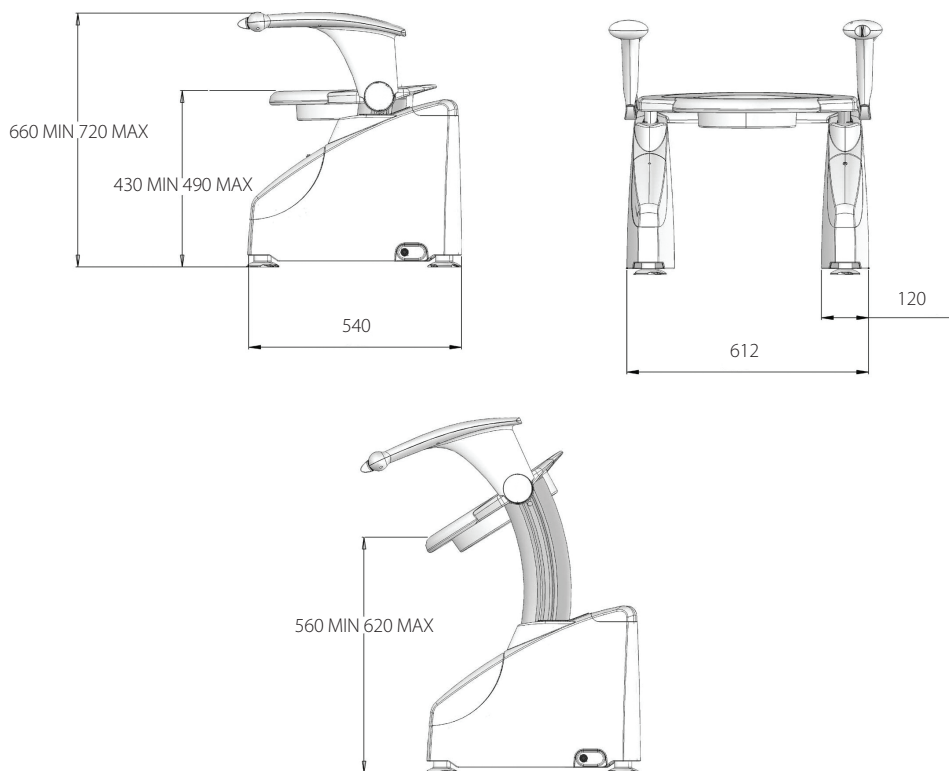

Die vertikalen abmessungen schwanken durch die einstellbaren füsse um 60mm.

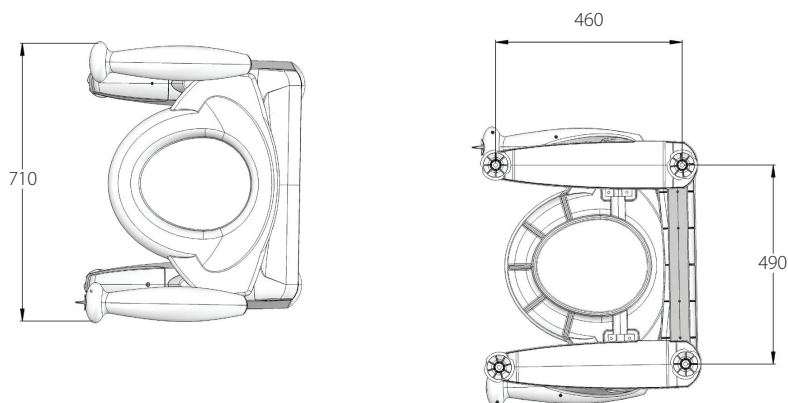

## 15. Fehlersuche

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung	Abschnitt
<b>Toilettenlift bewegt sich nicht. Kein Motorgeräusch.</b>	• Batterie ist nicht geladen.	• Batteriepack aufladen.	Abschnitt 2
	• Batteriepack falsch/nicht an den Toilettenlift angeschlossen.	• Legen Sie das Batteriepack korrekt in das Batteriefach auf der Vorderseite des Toilettenliftes ein. Üben Sie leichten Druck aus, um sicherzustellen, dass das Pack vollständig eingelegt ist.	Abschnitt 3, Abschnitt 5 und Abschnitt 7
	• Kabel Handsteuerung/ Armlehne falsch an Toilettenlift angeschlossen.	• Verbinden Sie das Kabel der Handsteuerung/ Armlehne mit der Dose links auf der Rückseite des Toilettenliftes.	Abschnitt 3, Abschnitt 5 und Abschnitt 7
	• Batterie fehlerhaft.	• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum. Tauschen Sie das Batteriepack aus.	k. A.
	• Mechanischer Defekt.	• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum.	k. A.
<b>Rotes Licht am Batteriepack leuchtet, aber der Toilettenlift bewegt sich nicht.</b>	• Batterie ist nicht geladen.	• Batteriepack unmittelbar aufladen.	Abschnitt 2
<b>Toilettenlift bewegt sich nur intermittierend.</b>	• Batterie ist nicht vollständig aufgeladen.	• Batteriepack aufladen.	Abschnitt 2
	• Übermäßiges Gewicht.	• Verwenden Sie den Toilettenlift nicht, wenn Sie mehr als 160kg wiegen.	Abschnitt 13
	• Toilettenlift ist während des Hebe- bzw. Absenkvorgangs auf ein Hindernis gestoßen, z. B. Waschbecken.	• Unterbrechen Sie den Betrieb sofort. Heben Sie den Toilettenlift an bzw. lassen Sie diesen ab, um das Hindernis zu entfernen.	Abschnitt 5
<b>Batteriepack scheint sich nicht aufzuladen.</b>	• Das Ladegerät wird nicht mit Strom versorgt.	• Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Ladegerätes in die Steckdose gesteckt ist. Überprüfen Sie die Leuchtanzeige am Ladegerät.	Abschnitt 2
	• Batteriepack ist falsch in das Ladegerät eingelegt.	• Stellen Sie sicher, dass der Bananenstecker am Kabel des Ladegerätes vollständig in der Dose für den Bananenstecker unter dem Batteriepack eingesteckt ist.	Abschnitt 2
	• Batterie hat sich vor der Verwendung entladen.	• Stellen Sie sicher, dass das Batteriepack nicht mit dem Ladegerät verbunden ist, wenn das Ladegerät von der Steckdose getrennt wird. • Laden Sie das Batteriepack nach längeren Standzeiten auf (in der Regel 7-10 Tage).	Abschnitt 2
	• Unterbrechung der Stromversorgung/ fehlerhafte Steckdose.	• Prüfen Sie die Anzeigenleuchten bei einer anderen Steckdose. • Prüfen Sie, ob andere elektrische Geräte funktionieren.	k. A.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung	Abschnitt
	• Ladegerät fehlerhaft.	• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum.	k. A.
	• Batterie fehlerhaft.	• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum.	k. A.
<b>Ladegerät ist an Steckdose angeschlossen, aber die Anzeigen leuchten nicht auf.</b>	• Batteriepack ist falsch in das Ladegerät eingelegt.	• Stellen Sie sicher, dass der Bananenstecker am Kabel des Ladegerätes vollständig in der Dose für den Bananenstecker unter dem Batteriepack eingesteckt ist.	Abschnitt 2
	• Ladegerät fehlerhaft.	• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum.	k. A.
<b>Keine Leuchten auf Handsteuerung/ Armlehne.</b>	• Batteriepack ist falsch an den Toilettenlift angeschlossen.	• Legen Sie das Batteriepack korrekt in das Batteriefach auf der Vorderseite des Toilettenliftes ein. Üben Sie leichten Druck aus, um sicherzustellen, dass das Pack vollständig eingelegt ist.	Abschnitt 3, Abschnitt 5 und Abschnitt 7
	• Kabel Handsteuerung/ Armlehne falsch an Toilettenlift angeschlossen.	• Verbinden Sie das Kabel der Handsteuerung/ Armlehne mit der Dose links auf der Rückseite des Toilettenliftes.	Abschnitt 3, Abschnitt 5 und Abschnitt 7
	• Ladegerät fehlerhaft.	• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum.	k. A.
	• Batterie fehlerhaft.	• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum.	k. A.
<b>Toilettenlift rutscht auf Boden hin und her.</b>	• Die Füße/Fußsteller sind nicht fest auf einem glatten Boden befestigt, z. B. gefliest, beschichtet.	• Befestigen Sie haftende rutschfeste Polster an der flachen Unterseite der Fußsteller und befestigen Sie diese an den Füßen des Toilettenliftes. • Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Füßen sauber und trocken ist.	Abschnitt 4 und Abschnitt 5
<b>Toilettenlift rutscht auf Schüssel hin und her.</b>	• Die Füße berühren den Boden nicht und/oder hintere Querstange liegt auf dem Porzellan auf.	• Stellen Sie die Höhe des Toilettenliftes ein, bis die hintere Querstange keinen Kontakt mehr zum Porzellan hat und alle 4 Füße den Boden berühren. Wenden Sie sich an den Lieferanten, um Informationen zur Eignung der Verlängerungsfüße zu erhalten.	Abschnitt 5 und Abschnitt 16
<b>Sitz des Toilettenliftes kippt zur Seite.</b>	• Der Sitz des Toilettenliftes wurde nicht nach jedem Einsatz in die tiefste Position abgelassen, wodurch der Motor unsynchron geworden ist.	• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum.	Abschnitt 7

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung	Abschnitt
<b>Armlehnen weisen Beschädigungen auf.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Toilettentlift wurde an den Armlehnen bewegt/getragen.</li> <li>• Übermäßige Kraft wurde während des Gebrauchs auf die Armlehnen ausgeübt.</li> <li>• Die Arme sind während des Hebevorgangs auf ein Hindernis gestoßen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an ein befugtes Wartungs-/Reparaturzentrum.</li> </ul>	Abschnitt 3 und Abschnitt 5

## 16. Zubehör

Der Toilettentlift kann mit einer breiten Palette an optionalen Zubehörteilen geliefert werden:

Zubehörteil	Teilnummer
<b>Verlängerungsfüße</b>	<b>TL 634/S</b>
Als Satz bestehend aus 4 Stck. geliefert. Verlängerungsfüße ermöglichen einen zusätzlichen Abstand zur Schüssel von bis zu 64 mm für Toilettenschüsseln, die über dem Durchschnitt liegen. Diese sind zum Zeitpunkt der Bestellung Ihres Toilettentliftes durch Mountway zu montieren.	



Zubehörteil	Teilnummer
<b>Linke/rechte Armlehne</b>	<b>Links – TL626/S</b> <b>Rechts – TL627/S</b>
Wenn keine Haltegriffe montiert werden können, helfen diese beim Übersetzen auf den und vom Lift und bieten beruhigende Unterstützung, wenn der Toilettentlift verwendet wird.	



Zubehörteil	Teilnummer
<b>Linke/rechte Armlehne mit Betriebsschalter</b>	<b>Links – TL625/S</b> <b>Rechts – TL628/S</b>
Armlehnen mit integriertem Betriebsschalter. Der leicht verwendbare Kippschalter in der Armlehne hilft nicht nur beim Übersetzen auf den und vom Lift, sondern kann auch anstelle der Handbedienung verwendet werden. Die Armlehne enthält auch eine Batteriestandanzeige.	






## 17. Teileliste

Artikelnummer	Beschreibung	Teilnummer
1	Formteil Chassisabdeckung	TL551
2	Brückenformteil	TL571
3	Fußsteller	TL554
4	Handsteuerung	TL575/S
5	Sitz	TL557
6	Standardmäßige Fußbaugruppe - Satz mit 4 Stck.	TL633/S
7	Batteriepack	TL621/S
8	Smart-Ladegerät (Europa) Smart-Ladegerät (Nordamerika)	CU3005 CU3004

Artikelnummer	Beschreibung	Teilnummer
9	Dichtung	TL556
10	Klemme	TL576
11	Inbusschlüssel	TL642
12	Schraube – Liefermenge 4	TL539
13	Oberes Formteil Armlehne	TL588
14	Rechte Armlehne mit Betriebsschalter	TL628/S
15	Rechte Armlehne	TL627/S
16	Linke Armlehne mit Betriebsschalter	TL625/S
17	Linke Armlehne	TL626/S

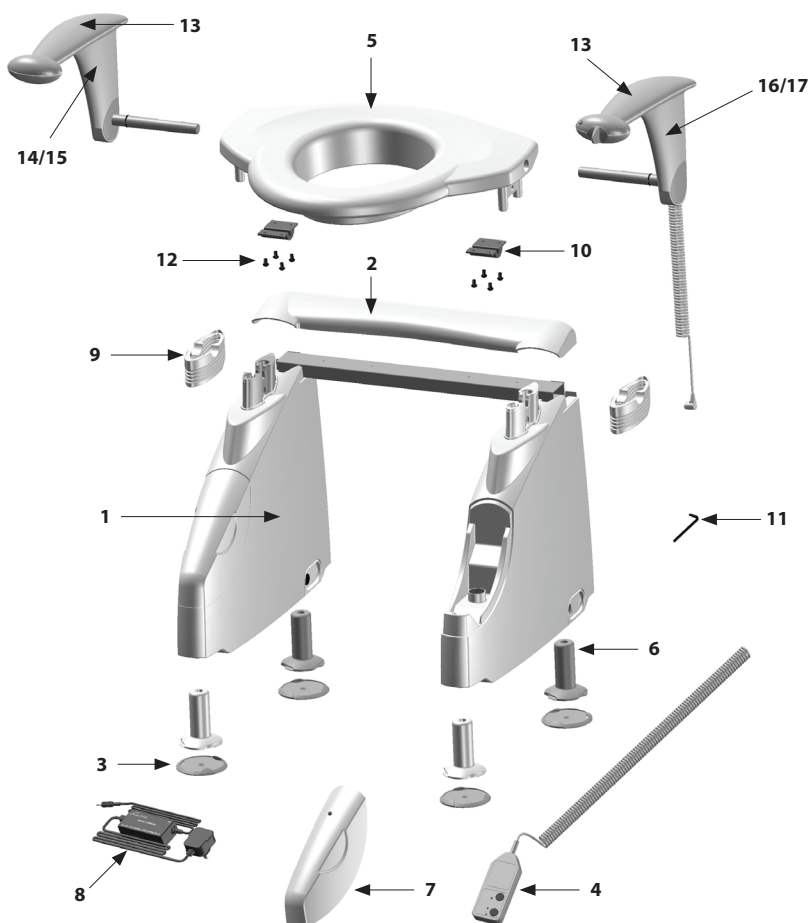

Mountway Limited behält sich das Recht vor, Produkt- und Verpackungsspezifikationen jederzeit zu ändern.



Diagram sheet



Page de schéma



Diagrammblatt



Hoja de diagramas




Foglio di diagrammi



Diagramblad

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A</b> Left hand arm with operating switch (also available without switch)<br/>         Left hand arm with operating switch (also available without switch)<br/>         Accoudoir de gauche avec interrupteur de fonctionnement (également disponible sans interrupteur)<br/>         Linke Armlehne mit Betriebsschalter (auch ohne Schalter verfügbar)<br/>         Brazo izquierdo con interruptor de funcionamiento (también disponible sin él)<br/>         Bracciolo sinistro con interruttore di funzionamento (disponibile anche senza interruttore)<br/>         Linkerarm met bedieningsschakelaar (ook beschikbaar zonder schakelaar)</p> | <p><b>H</b> Hand control<br/>         Hand control<br/>         Télécommande<br/>         Handsteuerung<br/>         Control manual<br/>         Comando manuale<br/>         Handbediening</p>      |
| <p><b>B</b> Right hand arm (also available with operating switch)<br/>         Right hand arm (also available with operating switch)<br/>         Accoudoir de droite (également disponible avec interrupteur de fonctionnement)<br/>         Rechte Armlehne (auch mit Betriebsschalter verfügbar)<br/>         Brazo derecho (también disponible con interruptor de funcionamiento)<br/>         Bracciolo destro (disponibile anche con interruttore di funzionamento)<br/>         Rechterarm (ook beschikbaar met bedieningsschakelaar)</p>   | <p><b>I</b> Allen key<br/>         Hexagonal key wrench<br/>         Clé hexagonale<br/>         Inbusschlüssel<br/>         Llave allen<br/>         Chiave a brugola<br/>         Inbussleutel</p> |
| <p><b>C</b> Seat<br/>         Seat<br/>         Siège<br/>         Sitz<br/>         Asiento<br/>         Sedile<br/>         Zitting</p>  |  |
| <p><b>D</b> Foot cup<br/>         Foot cup<br/>         Coupelle pour les pieds<br/>         Fußsteller<br/>         Círculo de pie<br/>         Base di appoggio<br/>         Voetkom</p>   |  |
| <p><b>E</b> Adhesive anti-slip pad<br/>         Adhesive anti-slip pad<br/>         Patin adhésif antidérapant<br/>         Haftendes rutschfestes Polster<br/>         Almohadilla adhesiva antideslizante<br/>         Supporti antiscivolo per piedini<br/>         Zelfklevende anti-slipring</p>  |  |
| <p><b>F</b> Battery charger<br/>         Battery charger<br/>         Chargeur de pile<br/>         Batterieladegerät<br/>         Cargador de batería<br/>         Caricabatterie<br/>         Batterijoplader</p>  |  |
| <p><b>G</b> Battery packs<br/>         Battery packs<br/>         Blocs-piles<br/>         Batteriepacks<br/>         Baterías<br/>         Pacchi batterie<br/>         Batterijpakketten</p>   |  |

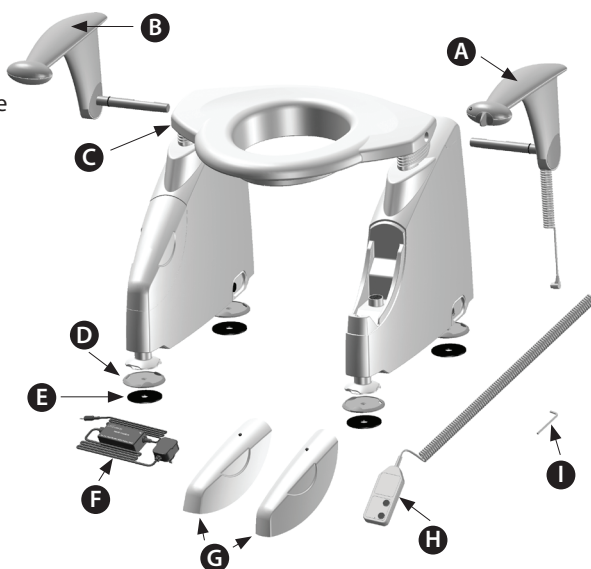

## 2

**A** Battery pack  
Battery pack  
Bloc-pile  
Batteriepack  
Bateria  
Pacco batteria  
Batterijpakket


**D** Jack plug  
Jack plug  
Fiche jack  
Bananenstecker  
Clavija jack  
Spina jack  
Kabelstekker

**F** Light indicator  
Light indicator  
Voyant lumineux  
Leuchtanzeige  
Indicador de luz  
Spia luminosa  
Lampje

**B** Jack plug socket  
Jack plug socket  
Connecteur fiche jack  
Dose für Bananenstecker  
Toma de la clavija jack  
Presa jack  
Kabelstekker aansluiting

**E** Charger plug  
Charger plug  
Prise du chargeur  
Stecker für Ladegerät  
Enchufe del cargador  
Spina caricabatterie  
Stekker voor de oplader


**C** Charger  
Charger  
Chargeur  
Ladegerät  
Cargador  
Caricabatterie  
Oplader

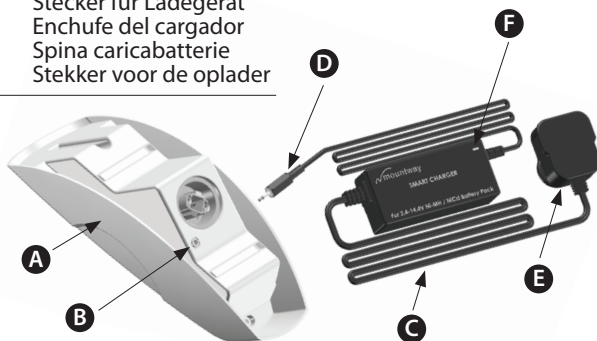

## 3

**A** Battery red light  
Battery red light  
Voyant rouge de la pile  
Batterie rotes Licht  
Luz roja de la batería  
Spia rossa batteria  
Rood lampje van de batterij


**B** Battery pack  
Battery pack  
Bloc-pile  
Batteriepack  
Bateria  
Pacco batteria  
Batterijpakket

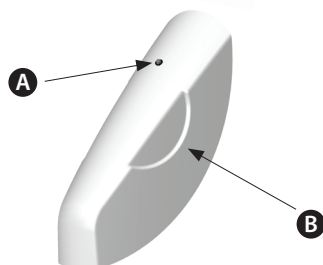

## 4

**A** Hand control/arm cable  
Hand control/arm cable  
Câble de la télécommande /de l'accoudoir  
Kabel Handsteuerung/Armlehne  
Cable del control manual/brazo  
Cavo comando manuale / bracciolo  
Handbediening/armkabel


**B** Hand control/arm cable socket  
Hand control/arm cable socket  
Connecteur du câble de la télécommande/de l'accoudoir  
Handsteuerungs-/Armlehnenkabeldose  
Toma del cable del control manual/brazo  
Presa cavo comando manuale / bracciolo  
Handbediening/armkabelaansluiting

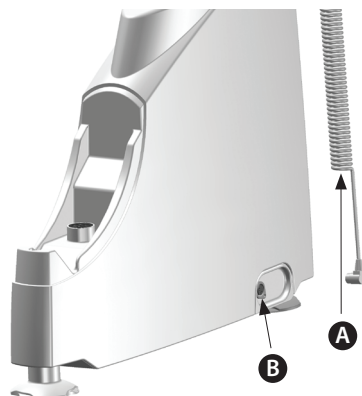

## 5

**A** Battery pack  
Battery pack  
Bloc-pile  
Batteriepack  
Batería  
Pacco batterie  
Batterijpakket

**B** Battery compartment  
Battery compartment  
Compartment pour pile  
Batteriefach  
Compartimento de la batería  
Vano batterie  
Batterijcompartiment

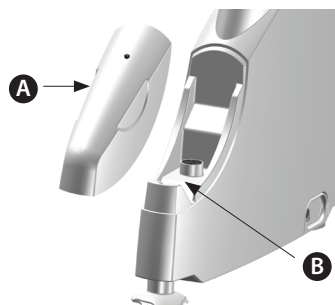

## 6


**A** Arm with operating switch  
Arm with operating switch  
Accoudoir avec interrupteur de fonctionnement  
Armlehne mit Betriebsschalter  
Brazo con interruptor de funcionamiento  
Bracciolo con interruttore di funzionamento  
Arm met bedieningsschakelaar

**B** Power light  
Power light  
Voyant d'alimentation  
Betriebsleuchte  
Luz de funcionamiento  
Spia alimentazione  
Aan-/uitlampje

**C** Down  
Down  
Bas  
Abwärts  
Abajo  
Giù  
Omlaag

**D** Toggle switch  
Toggle switch  
Interrupteur basculant  
Kippschalter  
Interruptor de palanca  
Interruttore a leva  
Aan-/uitschakelaar

**E** Up  
Up  
Haut  
Aufwärts  
Arriba  
Su  
Omhoog

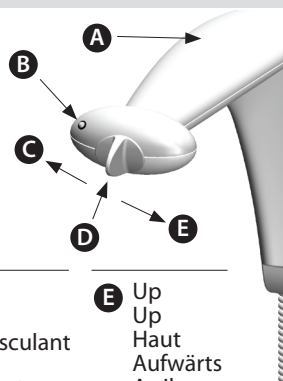

## 7


**A** Arm clamp  
Arm clamp  
Pièce de serrage pour les accoudoirs  
Armlehnenklemme  
Sistema de fijación  
Morsetto bracciolo  
Armkleem

**B** Screw  
Screw  
Vis  
Schraube  
Tornillo  
Vite  
Schroef

**D** Lifting strut  
Lifting strut  
Entretoise de levage  
Lifterstrebe  
Soporte de elevación  
Montante  
Liftstijl

**C** Rubber seal  
Rubber seal  
Joint en caoutchouc  
Gummidichtung  
Sello de goma  
Guarnizione in gomma  
Rubberen afsluiting

**E** Allen key  
Hexagonal key wrench  
Clé hexagonale  
Inbusschlüssel  
Llave allen  
Chiave a brugola  
Inbussleutel

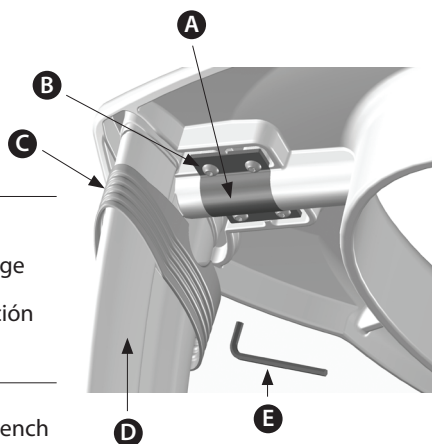


**A** Seat  
Seat  
Siège  
Sitz  
Asiento  
Sedile  
Zitting


**D** Seat hole  
Seat hole  
Trou du siège  
Sitzloch  
Agujero del asiento  
Foro sedile  
Opening van de zitting

**B** Arm  
Arm  
Accoudoir  
Armlehne  
Braso  
Bracciolo  
Arm


**C** Arm bar  
Arm bar  
Barre de l'accoudoir  
Armlehnenstange  
Barra del brazo  
Astina bracciolo  
Armbalk

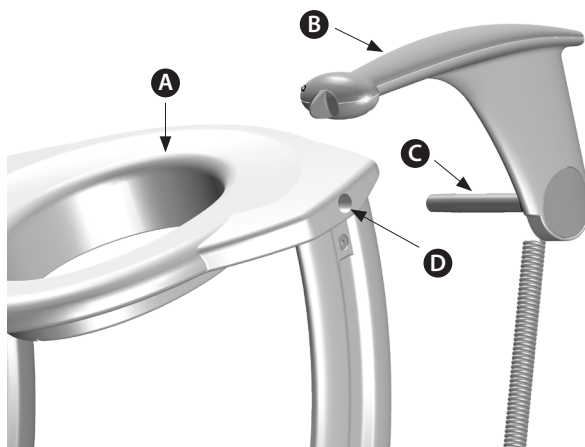

**A** Arm bar NOT correctly aligned  
Arm bar NOT correctly aligned  
Barre de l'accoudoir alignée INCORRECTEMENT  
Armlehnenstange NICHT korrekt ausgerichtet  
Barra del brazo alineada de forma INCORRECTA  
Astina bracciolo NON correttamente allineata  
Armleuning NIET correct uitgelijnd

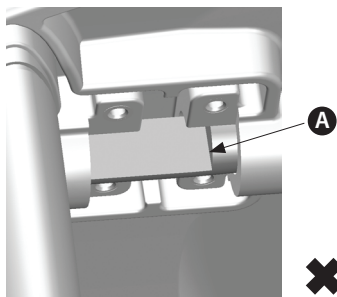


**B** Arm bar CORRECTLY aligned  
Arm bar CORRECTLY aligned  
Barre de l'accoudoir alignée CORRECTEMENT  
Armlehnenstange KORREKT ausgerichtet  
Barra del brazo alineada de forma CORRECTA  
Astina bracciolo CORRETTAMENTE allineata  
Armleuning CORRECT uitgelijnd

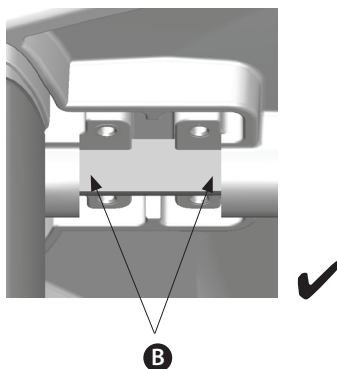

- A** Arm clamp  
 Arm clamp  
 Pièce de serrage pour les accoudoirs  
 Armlehnenklemme  
 Sistema de fijación del brazo  
 Morsetto bracciolo  
 Armklem

- B** Screws  
 Screws  
 Vis  
 Schrauben  
 Sistema de fijación del brazo  
 Viti  
 Schroeven


- C** Allen key  
 Hexagonal key wrench  
 Clé hexagonale  
 Inbusschlüssel  
 Llave allen  
 Chiave a brugola  
 Inbussleutel

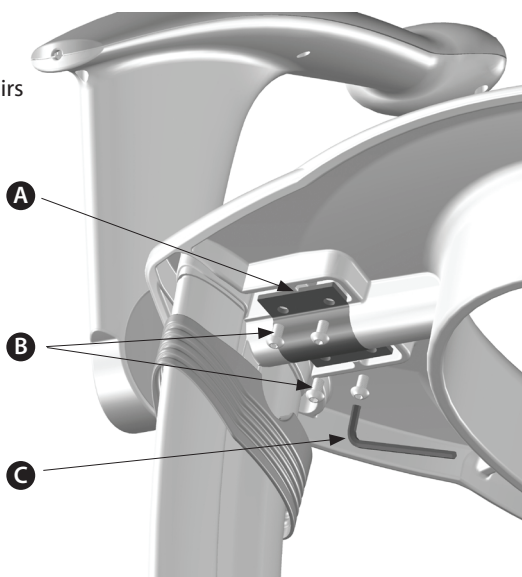

- A** Foot  
 Foot  
 Pied  
 Fuß  
 Pie  
 Piedino  
 Voet

- B** Foot cup  
 Foot cup  
 Coupelle pour les pieds  
 Fußteller  
 Círculo del pie  
 Base di appoggio  
 Voetkom

- C** Foot cup hole  
 Foot cup hole  
 Trou pour la coupelle pour les pieds  
 Fußtellerloch  
 Agujero del círculo del pie  
 Foro base di appoggio  
 Voetkomopening

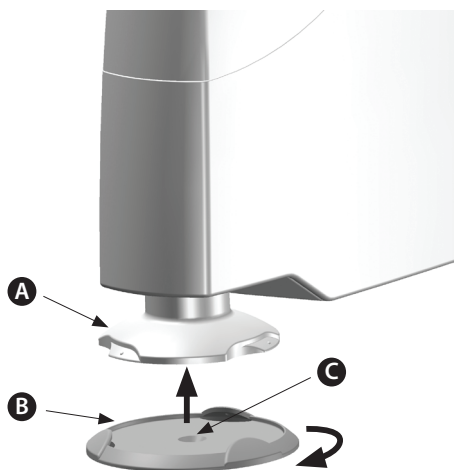


## 12

**A** Seat skirting  
Socle du siège  
Sitzeinfassung  
Borde del asiento  
Bordo interno  
Rand van de zitting

**B** Rear cross bar  
Rear cross bar  
Barre transversale arrière  
Hintere Querstange  
Barra transversal trasera  
Barra trasversale posteriore  
Achterste dwarsbalk

**C** Feet  
Feet  
Pieds  
Sitzeinfassung  
Pies  
Piedini  
Voeten

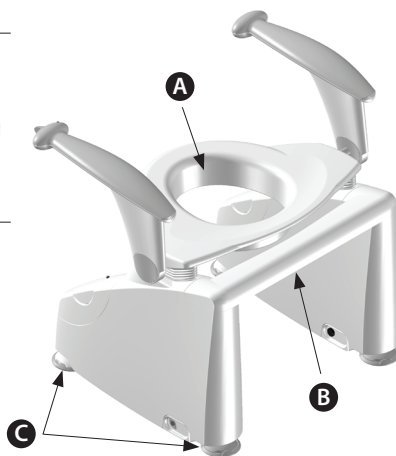


## 13

**A** Foot cup  
Foot cup  
Coupelle pour les pieds  
Fußsteller  
Círculo de pie  
Base di appoggio  
Voetkom

**B** Foot cup hole  
Foot cup hole  
Trou pour la coupelle pour les pieds  
Fußstellerloch  
Agujero del círculo de pie  
Foro base di appoggio  
Voetkomopening

**C** Foot  
Foot  
Pied  
Fuß  
Pie  
Piedino  
Voet

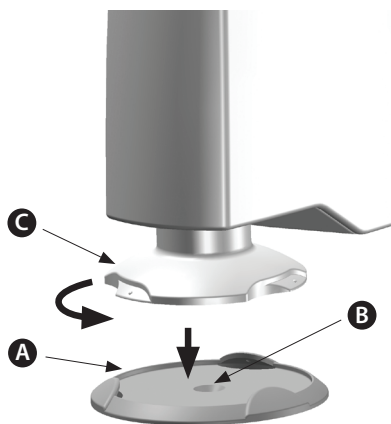


## 14

**A** Hand control  
Hand control  
Télécommande  
Handsteuerung  
Control manual  
Comando manuale  
Handbediening

**B** Power light  
Power light  
Voyant d'alimentation  
Betriebsleuchte  
Luz de funcionamiento  
Spia alimentazione  
Aan-/uitlampje

**C** Up  
Up  
Haut  
Aufwärts  
Arriba  
Su  
Omhoog

**D** Down  
Down  
Bas  
Abwärts  
Abajo  
Giù  
Omlaag

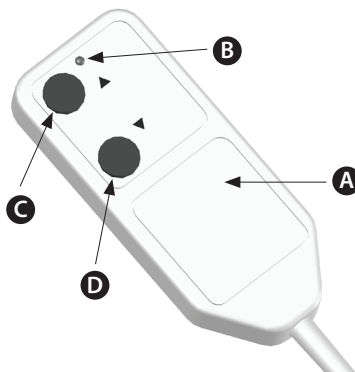







ML1040  
02:06/11

© **Mountway Limited 2011**

Tafarnaubach Ind. Est. Tredegar NP22 3AA UK

**tel** +44 (0)1495 723300 **fax** +44 (0)1495 723360

**freephone** 0800 014 1852

**e-mail** mail@mountway.co.uk

**www.mountway.com**



INVESTOR IN PEOPLE

